













OPREZ


- Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Uputstvo za upotrebu je deo proizvoda i sadrži važne informacije o korišćenju vage
- Čuvajte uputstvo za upotrebu.
- Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.


	CE znak		Simbol zelene tačke
	GOST-R Sertifikat		Čuvajte u suvim uslovima
	Rohs certifikat za komponente		Simbol za reciklažu
	Pratite uputstvo za upotrebu		Broj lota
	Upozorenje		Proizvođač
	WEEE direktiva za uređaj		EC Predstavnik


Opšta sigurnosna uputstva

- Postavite vagu na ravnu čvrstu površinu (pločice, parket...). Merenje na tepihu može dovesti do pogrešnih rezultata.
- Stanite na sredinu vage da biste izbegli prevrtanje.
- Izbegavajte da koristite vagu ako je površina vage mokra ili ako su Vam mokre noge, u suprotnom se možete okliznuti.
- Vodite računa da nikakvi objekti ne padnu na vagu, objekti koji padnu na vagu mogu slomiti i oštetiti površinu vage.
- Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu. Nikada nemojte koristiti razređivače ili abrazivna sredstva za čišćenje. Nemojte vagu uranjati u vodu.
- Proverite da pakovanje nije oštećeno, nemojte koristiti vagu ukoliko ima vidljivih oštećenja na pakovanju ili na samoj vagi. Vagu ne bi trebalo da koristite ukoliko ima bilo kakvih oštećenja, u tom slučaju obratite se prodavcu.
- Ova vaga nije dizajnirana za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu), kao i osoba koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje vage.
- Deca ne treba da se igraju sa vagon.

1. LCD displej

2.  Simbol mama – (kad mama koristi vagu)

3.  Simbol beba – (kad mama i beba koriste vagu)

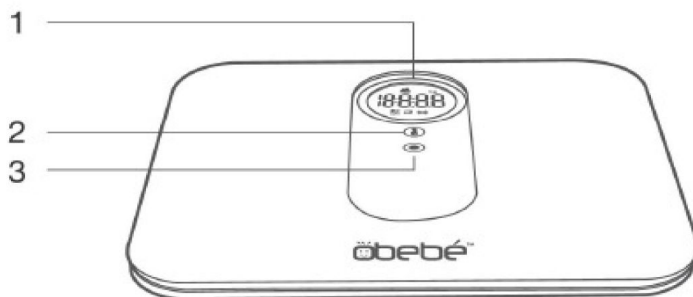




Uputstvo za upotrebu

Uvod

Vi i Vaše dete treba da se merite sa što manje odeće na sebi. Vodite računa da se svakog dana merite u isto vreme. S obzirom da je ljudsko telo podložno normalnoj fluktuaciji (npr. dehidracija usled bavljenja sportom ili zbog boravka u sauni ili unos hrane i pića), treba da probate da održite uslove u kojima se merite što konstantnijim kako biste dobili rezultate koje možete da uporedite.

Ova vaga je namenjena samo za kućnu upotrebu. Nije dizajnirana za korišćenje u bolnicama ili medicinskim ustanovama.


Postavljanje baterija

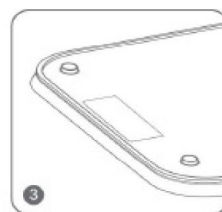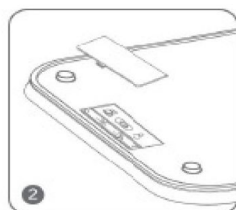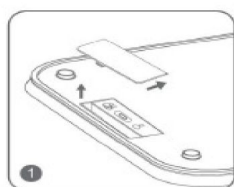

1. Otvorite poklopac za baterije kao što je prikazano na slici 1 u smeru strelica.
2. Postavite baterije kao što je označeno u odeljku za baterije.
3. Zatvoriet odeljak za baterije.

Korišćenje



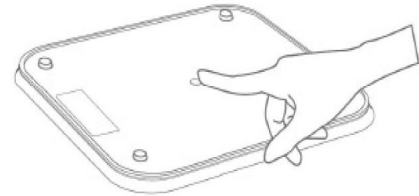

1. Pritisnite i držite dugme koje se nalazi na zadnjoj strani vage 5 sekundi. Kada pritisnete dugme jednom jedinica mere je „KG“, kada pritisnete dva puta jedinica mere je „Lb“, kada pritisnete treći put jedinica mere je „St“ (stone).



U odeljku za baterije se nalazi prekidač za izbor opcije: *mama* (merenje mame)  *mama & beba* (merenje mame i bebe) 

Funkcija merenja mame i bebe: MAMA & BEBA

2. Ako izaberete modalitet *mama & beba* vaga će automatski izračunavati težinu mame i bebe u dva veoma laka koraka.

- Prebacite na modalitet *mama & beba*. Na displeju će se pojaviti ikona *mama i beba* 
 - Postavite vagu na ravnu i čvrstu površinu.
 - Sačekajte da se na displeju pojavi nula. Stanite na vagu i ne pomerajte se dok ikonica treperi i ne čujete zvučni signal. Vaša težina je sačuvana.
 - Sidite sa vage i uzmite dete u ruke.
 - Ikonice *mama* i *beba*   će zajedno treperiti.
 - Stanite na vagu držeći dete u rukama.
 - Vaga će izračunati težinu deteta. Ikona *beba*  će se pojaviti na displeju. Čućete zvučni signal i biće prikazana težina deteta.
 - Vaga će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi.
- NAPOMENA: Imate 30 sekundi da stanete na vagu sa bebom u rukama, nakon toga vaga će se automatski isključiti.

Funkcija merenja mame: MAMA

3. Podesite dugme koje se nalazi u odeljku za baterije na *mama* modalitet. Ikona *mama i beba* više neće biti prikazane na displeju.

- Postavite vagu na ravnu i čvrstu površinu i sačekajte da se na displeju pojavi nula.
- Stanite na vagu i ne pomerajte se dok ne čujete zvučni signal i vaša težina ne bude prikazana na displeju.
- Sidite sa vage. Vaga će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi.

NAPOMENA: Vaga će sačuvati poslednji modalitet merenja. Samo stanite na vagu ako želite da je koristite na isti način. U suprotnom pritisnite dugme da podesite željeni modalitet merenja.



Moguće greške

-  **PREOPTEREĆENJE** – Maksimalni kapacitet od 150 kg je prekoračen. Sklonite teret sa vage odmah da biste izbegli oštećenje
-  **PRAZNE BATERIJE** – Zamenite baterije novim 3 x 1,5 V AAA


Nemojte bacati baterije sa smećem iz domaćinstva. Kao potrošač, prema zakonu ste obavezni da odložite iskorišćene baterije na za to zakonom predviđena mesta.

NAPOMENA:

Na baterijama se koriste sledeći simboli:

-  Li = Baterija sadrži litijum, Al = Baterija je alkalna, Mn = Baterija sadrži mangan
-  CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

DEPONOVANJE ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA

 Ovaj simbol na proizvodu ili pakovanju znači da se ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva, već na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte lokalnu komunalnu službu radi dobijanja informacija o odlaganju.

Tehnička specifikacija

Dimenzije	330 x 310 x 22,5 mm
LCD	Plavo pozadinsko svetlo
Težina	1,82 kg
Snaga	3 x AAA
Merna jedinica	kg
Minimalna težina	3 kg
Maksimalna težina	150 kg
Podeoci	0,1 kg
Uslovi korišćenja	od 0°C ~ 40°C, Vlažnost vazduha < 90% RH
Uslovi skladištenja	od -20°C ~ 60°C, Vlažnost vazduha < 90% RH